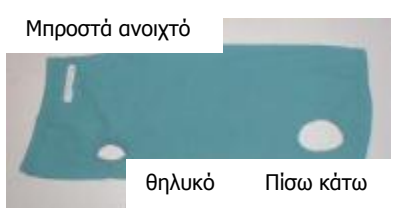
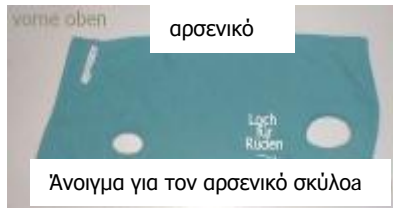

		Φαξ: +43-5578-74299 ή INTERNET: www.vetmedcare.ch	Dr. Norbert Freitag VetMedCare Hauptstr. 35c A-6973 Höchst Καινοτομίες για τις ανάγκες των ζώων Τηλέφωνο: +43-5578-76648 Φαξ: +43-5578-74299 E-mail: vetmedcare@vetmedcare.ch Internet: www.vetmedcare.ch αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ATU 35774408
--	--	--	---

Αρ. προϊόντος	Προϊόν	Μέγεθος	Πίνακας διαστάσεων	Περίμετρος λαιμού	Περίμετρος στήθους	Απόσταση μπροστινών από τα πίσω πόδια
Θηλυκό – No.Art. 10.011 – 10.016 – Ετικέτα με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΥΚΙΔΑ είτε θηλυκό			αρσενικό – No. Art. 10.021 – 10.026 - ΜΠΛΕ ΚΟΥΚΙΔΑ είτε αρσενικό			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	Μικρό γιορκοάιρ τεριέ, μικρό λάσα, τσιουάουα, παπιγιόν	15 -20	20 -30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	Μαλτέζικος, ντάσχουντ μίνι, κανίς μίνι, πομεράνιαν, τεριέ, μπισόν	20 -25	30 - 40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	Ντάσχουντ, φοξ τεριέ, τζακ ράσελ τεριέ, πουγκ, κανίς, μπιγκλ	25 – 35	40 – 50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	Κόλι, άπεντσελ, τσόου τσόου, σνάουζερ, κόκερ σπάνιελ	35 – 45	45 – 60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	Ποιμενικός, ντόμπερμαν, Δαλματίας, Golden Retriever, μολοσσός	45 – 55	60 – 75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	Αγίου Βερνάρδου, μαστίφ, μεγάλος ποιμενικός, ροτβάιλερ, μολοσσός Δανίας	55 – 60	75 – 90	67

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Πάνω-μπροστά-εσωτερικά σε κάθε dog&cat-body βρίσκεται η εκάστοτε ετικέτα μεγέθους (xs, s, m, l, xl, xxl).
2. Τραβήξτε πρώτα το dog&cat-body πάνω από το χέρι σας, ώστε το άκρο του dog&cat-body να βρίσκεται στα ακροδάχτυλά σας. Στη συνέχεια φορέστε το στο σκύλο ή τη γάτα σας ξεκινώντας από το κεφάλι και περάστε τα μπροστινά πόδια και κατόπιν τα πίσω πόδια. Αν πρόκειται για αρσενικό σκύλο, περάστε το πέος του μέσα από το άνοιγμα.
3. Τεντώστε το dog&cat-body. Έτοιμο.
4. Επιλογή μεγέθους: Ένα γρήγορο προσανατολισμό προσφέρει η απόσταση των μπροστινών ποδιών από τα πίσω πόδια, καθώς και η περίμετρος του στήθους. Επιπλέον βοηθούν τα αναφερόμενα ονόματα ράτσας.
5. Επειδή τα υψηλής ποιότητας υλικά ελασάνη και πολυαμίδη προσφέρουν εξαιρετική ελαστικότητα τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος, το dog&cat-body θα πρέπει να είναι κάπως πιο μικρό από το σκύλο ή τη γάτα, ώστε να εφαρμόζει καλά. Επιπλέον, η ελαστικότητα του dog&cat-body παρέχει στο θηλυκό σκύλο ένα ενισχυμένο στρογγύλεμα κάτω και πίσω, διευκολύνοντας στην ούρηση.

 <p>Μπροστά ανοιχτό</p> <p>θηλυκό Πίσω κάτω</p>	 <p>arsenikó</p> <p>Άνοιγμα για τον αρσενικό σκύλο</p>	Υποδείξεις φροντίδας: 
Υλικό: 90 % πολυαμίδη 10 % ελασάνη (90/10 PA/EL)		
Ευχόμαστε να απολαύσετε αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν. Σε περίπτωση ερωτήσεων απλά απευθυνθείτε σε εμάς μέσω ΦΑΞ ή E-MAIL. Η ΟΜΑΔΑ της VetMedCare		