
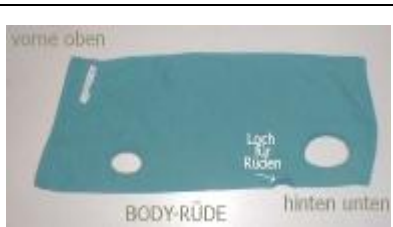



	FAX DE COMMANDE: +43-5578-74299 ou INTERNET: www.vetmedcare.ch	Dr. Norbert Freitag VetMedCare 	Hauptstr. 35c A-6973 Höchst
		<i>Innovations dans le domaine des articles animaliers</i>	Telefono: +43-5578-76648 Fax: +43-5578-74299 E-mail: vetmedcare@vetmedcare.ch Internet: www.vetmedcare.ch
No.IVA.Eur.: ATU 35774408			

N° d'article	Article	Taille	Notice de pose – Tableau des tailles	Tour de cou en cm	Tour de poitrail en cm	distance pattes avant – pattes arrière en cm
Femelle – No.Art. 10.011 – 10.016 – Indication avec point rouge			Mâle – No. Art. 10.021 – 10.026 - Indication avec point bleu			
10.012 10.022	Dog&cat-body	XS	Petite Yorkshire Terrier, Petite Lhasa, Chichuahua	15-20	20-30	24
10.013 10.023	Dog&cat-body	S	bichon maltais, Petite Teckel, caniche nain, Loulou de Poméranie, Terrier, Bichon	20-25	30-40	38
10.014 10.024	Dog&cat-body	M	Teckel, Fox-terrier, Jack Russell Terrier, Caniche, Beagle	25-35	40-50	46
10.015 10.025	Dog&cat-body	L	Colley, Appenzellois, Chow Chow, Cocker Spaniel	35-45	45-60	50
10.016 10.026	Dog&cat-body	XL	Berger, Doberman, Dalmate, Golden Retriever, Dogue	45-55	60-75	60
10.012 10.022	Dog&cat-body	XXL	Saint-Bernard, Mastiff, grande Berger, Rottweiler, Dogue Danois	55-60	65-90	67

CONSEILS

- L'étiquette de taille correspondante (XS, S, M, L, XL, XXL) est apposée **sur le dessus à l'avant et à l'intérieur** de chaque **dog&cat body**.
- Tirez tout d'abord le **dog&cat body** sur votre main de manière à ce que l'extrémité du **dog&cat body** soit sur la pointe des doigts. Enfilez-le à présent en commençant par la tête du chien ou du chat, faites passer les pattes avant puis les pattes arrière. Pour les mâles, faire passer le pénis dans l'orifice prévu à cet effet.
- Tendez le **dog&cat body**. **Opération terminée.**
- Choix des tailles** : la distance entre les pattes avant et les pattes arrière ainsi que le tour du poitrail donnent de premiers renseignements. Les noms de races mentionnés sont une aide supplémentaire.
- Etant donné que la matière de qualité supérieure en **élasthanne** et **polyamide** présente une excellente élasticité aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur, le **dog&cat body** devrait être choisi un peu plus petit que l'animal, pour garantir un bon maintien. De plus, l'effet de tension du **dog&cat body** chez la chienne favorise un arrondi renforcé en bas à l'arrière-train, ce qui permet à la chienne de « faire pipi » plus facilement.

		Conseils d'entretien: 
Matière: 90 % Polyamide 10 % Elasthanne (90/10) PA/EL		
Nous espérons que vous profiterez pleinement de ce produit de qualité supérieure. Pour toute question, contactez-nous tout simplement par FAX ou E-MAIL. Votre équipe VetMedCare!		